

# Relaxmedic



## Infratech Hammer

Manual de instruções

A beleza de viver bem.

# Infratech Hammer

Parabéns pela aquisição! Ao comprar o Infratech Hammer Relaxmedic, você optou por um produto de alta qualidade.

Para que você obtenha o máximo de benefícios do seu aparelho e tenha um longo período de satisfação, recomendamos que você leia atentamente as instruções de funcionamento e manutenção abaixo.

Nota: Reservamo-nos o direito de alterações em nossos produtos sem aviso prévio.


## Especificações do Produto

Voltagem: 110V OU 220V

Potência: 20W

Velocidade: Baixa e Alta

## Estrutura do produto e acessórios

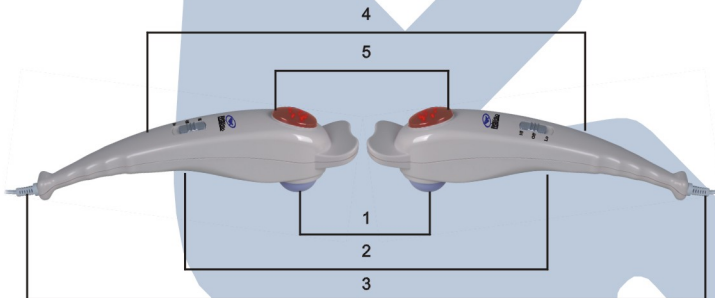

**Código do produto:** HQM810

**Estrutura:** 1. Cabeça do massageador de silicone; 2. Botão para ligar e funções; 3. Cabo de alimentação; 4. Cabo do massageador; 5. Luz



Massageador com uma saliência;



Massageador com quatro saliências;



Massageador com cabeça lisa.

## Precauções

- É proibido usar uma voltagem mais alta do que a especificada no seu produto.
- Não utilize seu produto em lugares úmidos como banheiros, piscinas, saunas ou SPA.

- Não use próximo a fontes de calor para evitar explosão.
- Não utilize seu produto quando a parte externa do produto ou os fios estiverem quebrados ou danificados.
- Certifique-se que o botão esta na posição “Off” quando ligá-lo na tomada.
- É recomendável não utilizar seu produto por mais de 15 minutos. Se for utilizado por mais tempo poderá causar super aquecimento e reduzir a vida útil do seu produto.
- Em caso de danificar ou parar de funcionar, leve a uma assistência técnica autorizada.
- Nunca deixe o aparelho ao alcance de crianças sem a supervisão de um adulto. Equipamento elétrico não é brinquedo.
- Use o aparelho apenas com acessórios próprios para este modelo, fornecidos pela Relaxmedic.
- Não utilize este produto em partes sensíveis de se corpo, como os olhos e ferimentos.
- Não use este produto em caso de: gravidez, menstruação ou aborto; pessoas com inflamação pós-cirúrgica ou doenças dermatológicas; fraturas.
- Por favor, pare de usar e consulte um medico sempre que sentir desconforto ao usá-lo.

## Características e funções

Um desenho delicado e moderno faz com que seja fácil de carregar e manusear. Com desenho ergométrico, o Infratech Hammer pode massagear suas costas, cintura ou outras partes do seu corpo.

Uma massagem delicada, mas firme penetra nos músculos acelerando a circulação sanguínea, fazendo com que o stress dos músculos seja liberado.

Possui duas velocidades e vários acessórios de silicone; este produto foi elaborado para satisfazer suas necessidades.

## Instruções de uso

Uma vez na tomada, ele fica na posição standby.

Empurre o botão para cima ou para baixo para escolher a intensidade da sua massagem: “Lo” para uma velocidade baixa com força leve, e “Hi” para uma velocidade alta com mais força.

Empurre o botão para “Off” para parar e finalizar a massagem.

Desconecte o produto da tomada quando trocar os acessórios. Utilize um pouco de força para fixá-los.

## Manutenção e Armazenamento

Desconecte da tomada e guarde-o em lugar seco e arejado.

Para assegurar a durabilidade do seu produto, é aconselhável guardá-lo pelo menos 20 minutos antes de reutilizá-lo.

Não utilize detergentes abrasivos para limpar seu produto. Use apenas um pano seco.

Não deixe os orifícios com acúmulo de pó ou cabelos.

Não armazene o produto em local úmido ou próximo a fonte de calor.

Não exponha o produto ao sol por longo período.

Não desmonte o produto para evitar choque elétrico.

# Garantia de 1 ano.



Nome do produto: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_

Nome da Loja: \_\_\_\_\_ Nº da nota fiscal: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_ RG: \_\_\_\_\_

End. Residencial: \_\_\_\_\_

Nº: \_\_\_\_\_ Comple.: \_\_\_\_\_ Estado: \_\_\_\_\_ CEP: \_\_\_\_\_

Data da Compra: \_\_\_\_\_ Telefone de contato: \_\_\_\_\_

## TERMO DE GARANTIA

Este produto tem garantia de 1 (um) ano, contado a partir da data da emissão da nota fiscal de compra, desde que o mesmo tenha sido instalado e/ou usado conforme de orientações descritas no (ou neste) manual de instruções.

Durante o período de garantia, o produto enviado, passará por uma prévia análise técnica para verificação da existência de defeito de fabricação. Nos casos onde haja algum tipo de alteração na originalidade do produto, será cobrado o conserto e nossa central entrará em contato com o cliente informando o valor e motivo do orçamento cobrado. O produto deverá estar acompanhado de sua nota fiscal, dados cadastrais do cliente, e todos os acessórios que possui. O produto deverá estar devidamente embalado.

Caso não for possível o reparo de seu produto, garantimos a substituição do mesmo.

Nosso prazo para devolução é de 30 dias corridos a partir do recebimento do produto.

## A GARANTIA PERDE SEU EFEITO SE:

- A instalação ou utilização do produto estiver em desacordo com as recomendações do manual de instruções;
- O produto sofrer qualquer tipo de dano provocado por acidente, queda, agentes da natureza, ou consertos realizados por pessoas não credenciadas pela Relaxmedic Importação Exportação Ltda.

## A GARANTIA SOMENTE É VÁLIDA MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL DE COMPRA DESTE PRODUTO

Central de Atendimento ao Consumidor

Ligue (11) 3393-3688

